

## 환경분석에 적합한 경질 유리 팁 분주기



용량 표시부



그립부

### 분주기 (GLASS DIGIFIT)

환경 호르몬 분석 등의 초미량 분석에 있어 플라스틱 팁 분주기는 화학물질의 용출이 우려되어 적합하지 않으나 GLASS DIGIFIT은 팁을 유리로 제작하여 화학물질 용출에 대한 영향 없이 검사 대상액의 핸들링이 가능.

### [특징]

- 소형으로 경량.
- 4종류로 20 $\mu$ L ~ 10,000 $\mu$ L(10mL)까지의 샘플링에 대응.
- 접액부는 경질 유리 팁.
- 용량 설정은 PUSH 버튼을 회전시켜 원터치 록 나사로 고정.
- 흡인 기구부는 PTFE를 사용.
- 조작성을 고려하여 설계한 그립부 형상.

### ■ 사양

규격	분주범위	적합한 팁	눈금단위 $\mu$ L	정밀도%	재현성%	수량
0.2mL	20 ~ 200 $\mu$ L	유리 팁 0.2mL용	0.2	$\pm$ 6.0 ~ $\pm$ 3.0	$\leq$ 6.0 ~ $\leq$ 3.0	10
1mL	100 ~ 1,000 $\mu$ L	유리 팁 1mL용	1	$\pm$ 5.0 ~ $\pm$ 3.0	$\leq$ 5.0 ~ $\leq$ 3.0	
5mL	1,000 ~ 5,000 $\mu$ L	유리 팁 5mL용	10	$\pm$ 5.0 ~ $\pm$ 3.0	$\leq$ 5.0 ~ $\leq$ 3.0	
10mL	1,000 ~ 10,000 $\mu$ L	유리 팁 10mL용	10	$\pm$ 6.0 ~ $\pm$ 3.0	$\leq$ 6.0 ~ $\leq$ 3.0	

※ 재현성은 주위 온도에 따라 상이.

■ 부속품 : 유리팁 1개, 노즐 O-ring 2개.

## 분주기


### 분주기 FIX A RET / 흰색 / 실리콘 스토퍼 포함

분주 용량mL	눈금 단위mL	실리콘 스토퍼 No.
0.5~5	0.05	10
1~10	0.1	10
2~20	0.2	12
5~50 *(1)	0.5	15
10~100 *(1)	1	15

\*(1) 유리 노즐 및 PVC 튜브 세트 (소), 노즐 캡 미포함.

#### ※ 제품명

NO.	제품명
1	스토퍼 포인트 플랜지
2	유리 노즐 및 PVC 튜브 세트 (소)
3	노즐 캡
4	유리 노즐 및 PVC 튜브 세트 (대)

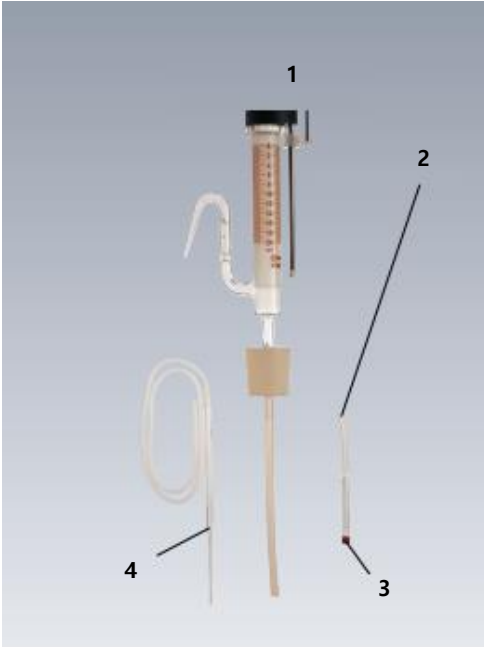

### 분주기 REBURET / 흰색

분주 용량mL	눈금 단위mL	규격	병 용량L	접속구
0.5~5	0.05	등근 병 포함 (갈색)	1	M26 × P4mm
1~10	0.1		1	
2~20	0.2		3.8	
0.5~5	0.05	본체만	-	M26 × P4mm
1~10	0.1		-	
2~20	0.2		-	

#### ※ 제품명

NO.	제품명
1	스토퍼 포인트 플랜지
2	유리 노즐 및 PVC 튜브 세트 (소)
3	노즐 캡
4	유리 노즐 및 PVC 튜브 세트 (대)
5	스크류 캡
6	테프론 와셔



등근 병

본체만

### 분주기 REBURET / 갈색

분주 용량mL	눈금 mL	규격	병 용량L	접속구
0.5~5	0.05	등근 병 포함 (갈색)	1	M26 × P4mm
1~10	0.1		1	
2~20	0.2		3.8	
0.5~5	0.05	본체만	-	M26 × P4mm
1~10	0.1		-	
2~20	0.2		-	

※ FIX A RET, REBURET의 정밀도는 ±1%, 재현성은 <0.1%.

※ 인렛 튜브의 재질은 PTFE.



REBURET용 부품

■ 시약병 장착용 아답터 세트

세트 구성	비고
아답터 28, 32, 38, 45mm 인렛 튜브 30cm (각 1개)	1 ~ 20mL용

■ REBURET용 병

사양	비고
등근 병 1L (갈색) GL-28	1, 5, 10mL용 *(1)
겔런 병 3.8L (갈색)	20mL용 *(1)
나사 스토퍼 병 1L GL-45 (흰색)	1 ~ 20mL용 *(2)

\*(1) REBURET 접속용 시약병 장착용 아답터, 인렛 튜브 각 1개 포함.

\*(2) 장착용 부품 포함.

■ REBURET용

세트 구성	비고
와셔, 분리 와셔	1 ~ 20mL용
스크류 캡 (3개)	

REBURET, FIX A RET용 부품

부제품명	용량	구성 수
스토퍼 포인트 플랜지	1mL용	2
	5mL용	
	10mL용	
	20mL용	1
	50mL용	
	100mL용	
선관 튜브세트 (대)	1mL용 *(1)	2
	5mL용 *(1)	
	10mL용 *(1)	

\*(1) 튜브 외경 4.0mm, 내경 2.5mm.

