


## 보존병과의 접속에는 오염이 적은 SPC 조인트를 채용

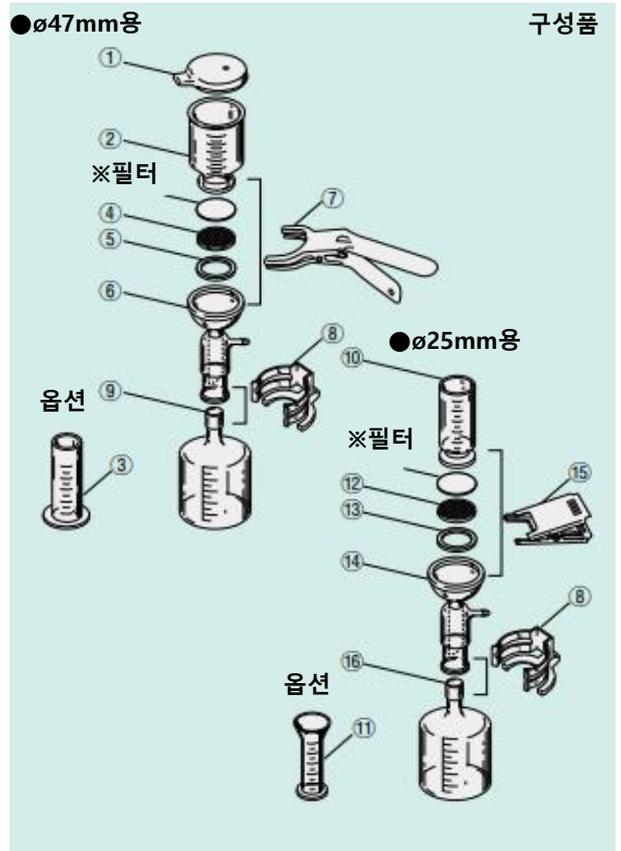

### SPC 필터 홀더 (SUS316 서포트 스크린 타입)

#### [특징]

- ø25mm, ø47mm 필터용 홀더. 서포트 스크린은 분리가 가능한 SUS316 모델로 세정 및 교환이 간단.
- 전용 클램프가 필터 베이스와 편넬을 강하게 눌러주기 때문에 용액이 필터에 있는 여과면만 통과함.
- 유리부는 SIBATA유리(규산염)를 사용.
- 감압여과에 따른 일반분석에 적합.  
(주사액 안의 불용성 미세입자 분석, 소용량 청징 여과 등)

#### [사양]

구분	상세	
제품명	SPC 필터 홀더 (ø47mm)	SPC 필터 홀더 (ø25mm)
	SUS316 서포트 스크린 타입	SUS316 서포트 스크린 타입
필터 적용 사이즈	ø47mm	ø25mm
편넬	300mL	80mL
필터용 베이스	SUS316	SUS316
SPC 보존병	1L	500mL

※ ø47mm 고무 캡은 오토 클레이브로 멸균 불가.



#### ■ 부품 LIST

NO.	제품명
1	ø47mm 고무 캡 5개입
2	편넬 300mL ø47mm용
3	편넬 100mL (옵션) ø47mm용
4	서포트 스크린 SUS316 ø47mm용
5	PTFE 패킹 10개입 ø47mm용
6	SPC 유리 베이스 SPC-29 ø47mm용
	SUS316 서포트 스크린 2단여과용 필터 베이스 ø47mm용
7	클램프 ø47mm용
8	조인트 클램프 29/42 10개입
9	SPC 보존병 1L SPC-29
10	편넬 80mL ø25mm용
11	편넬 20mL(옵션) ø25mm용
12	서포트 스크린 SUS316 ø25mm용
13	PTFE 패킹 10장입 ø25mm용
14	SPC 유리 베이스 SPC-29 ø25mm용
15	클램프 ø25mm용
16	SPC 보존병 500mL SPC-29